



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Массажер для рук HAND RELAX (AGF 701)




СОДЕРЖАНИЕ

КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	3
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ АДАПТЕР ПИТАНИЯ	4
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ.....	4
Использование	4
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	5

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Массажер включает хост, адаптер питания, руководство по эксплуатации.

Массажер

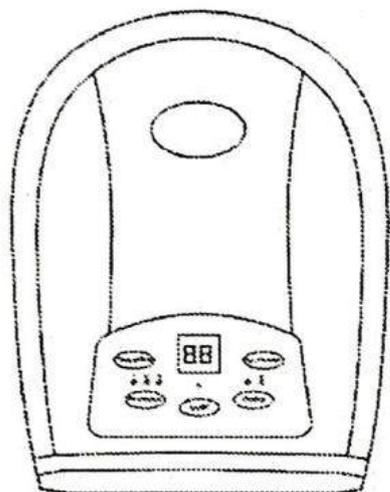

Базовая комплектация




Power Adapter



**User Manual/Certificate of
Qualification/Warranty Card**

1. Адаптер питания
2. Инструкция

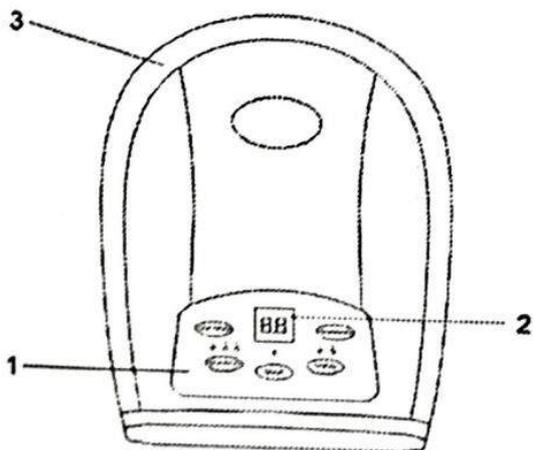

1. Панель управления (время, давление воздуха, включение / выключение обогрева, декомпрессия)
2. Экран дисплея трубки Nixie
3. Гнездо постоянного тока

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ АДАПТЕР ПИТАНИЯ


1. Вставьте пушечную вилку адаптера питания в разъем питания постоянного тока изделия, а другой конец подключите к источнику переменного тока. (Внешнее питание не заряжает батарею) 2. Когда батареи установлены в устройстве и подключены к внешнему адаптеру питания, изделие можно использовать в обычном режиме.

Пожалуйста, будьте уверены, что установка батареи откройте крышку батарейного отсека на задней части массажера, вставьте 4 щелочные батарейки типа AA, как указано положительным и отрицательным электродами, и закройте крышку батарейного отсека.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Использование

1. Разведите ладонь (ладонью вниз) внутрь массажера;
2. После того, как массажер включен, используйте функциональные клавиши, чтобы насладиться соответствующей функцией массажа.

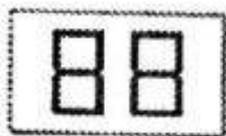

Отображение времени



Клавиша времени: регулировка времени массажа (диапазон установки времени составляет 5-15 минут).



Клавиша давления воздуха: управление интенсивностью массажа. Устройство имеет три вида интенсивности массажа, отображаемые с помощью световых индикаторов. (I - низкий класс, II - средний класс, III - высокий класс)



Клавиша включения / выключения: управление общей функцией включения или выключения.



Клавиша обогрева: Когда функция массажа включена, обогрев можно контролировать независимо, а индикатор горит светом, когда отопление включено. (I - следующий уровень, II - высокий класс).



Клавиша декомпрессии: управляет функцией декомпрессии всего устройства (короткое нажатие вызывает декомпрессию выхлопных газов, длительное нажатие - удаление).

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Не используйте ручной массажер во время вождения.
2. Не используйте массажер в жарких и влажных местах.
3. Не используйте массажер, если на руке появилось красное воспаленное воспаление, кровотечение или другие симптомы.
4. Перед использованием убедитесь, что на вашей ладони нет украшений.
5. Не наносите лак для ногтей в течение 1 часа перед использованием.
6. Положите ладонь в подкладку массажера перед включением, чтобы предотвратить повреждение от избыточного давления. Рекомендуется носить одноразовые перчатки, чтобы использовать этот продукт.
7. Пожалуйста, используйте регулируемый источник питания компании и обратите внимание на безопасность электроэнергии.
8. Когда уровень заряда батареи низкий, извлеките батареи, чтобы избежать повреждения машины из-за утечки батареи (рекомендуются щелочные батареи).

9. Ручной массажер разработан как домашний электронный продукт для здоровья и не применяется для диагностики, лечения и других коммерческих целей.

10. Для очистки протрите стерильной ватой, пропитанной мягким моющим средством. Не мойте изделие водой

11. Этот массажер имеет функцию нагрева. Пожалуйста, обратите внимание на пользователя, который не чувствителен к измерению температуры.

Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**